


アトファイン™ 3つのポイント


1 1枚で“簡単ケア”

- タテにもヨコにも伸びにくい素材の採用により、「傷あと」への伸展刺激を抑制できます。
- 1枚のテープで皮ふを固定できるため、何枚も切って重ね貼りする必要がなく、簡単にケアできます。
- その他、摩擦刺激・紫外線などの外部刺激から「傷あと」を守ります。

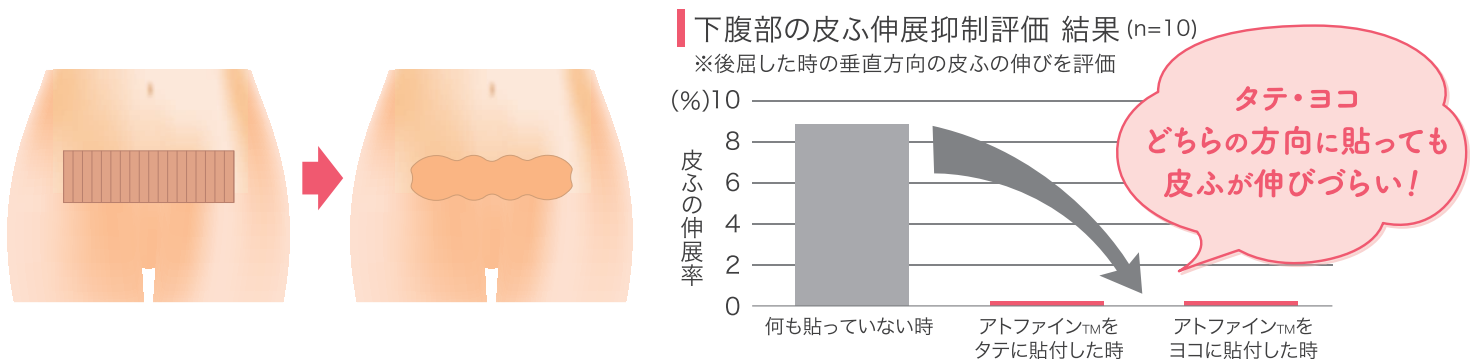


2 肌に優しく“長く続けられる”

- 肌に優しい粘着剤を使用しているため、はく離刺激が少なく、ケアが続けられます。
- 高い透湿性により、汗をかいてもムレにくく、貼っている間も快適です。

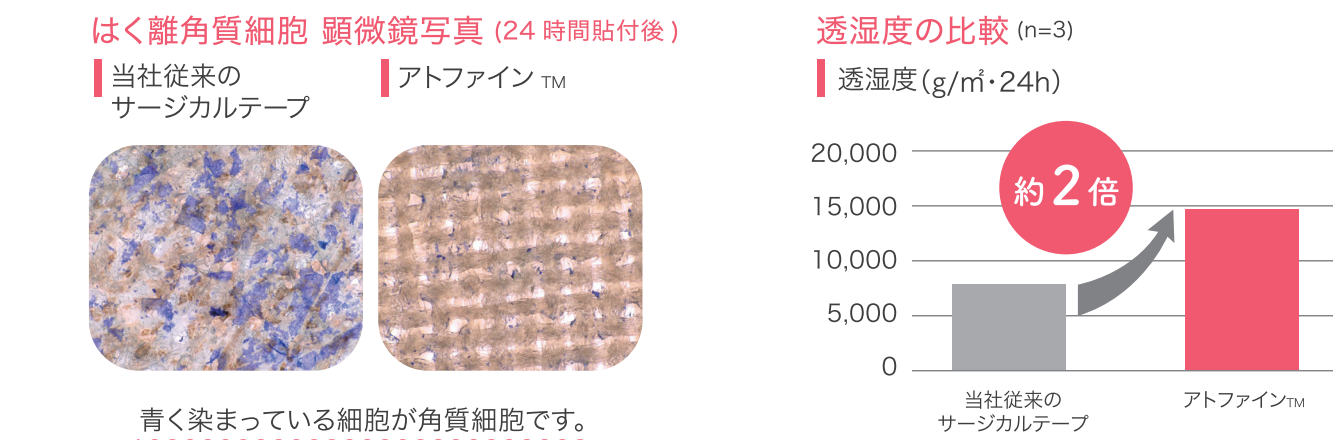

3 ウェーブ形状で“はがれにくい”

- テープのカドを無くしたウェーブ形状により、はがれにくくなっています。
- 肌への負担を和らげ、かゆみの発生を軽減します。
- 5～7日間に1回の交換で済むため、手間がかかりません。

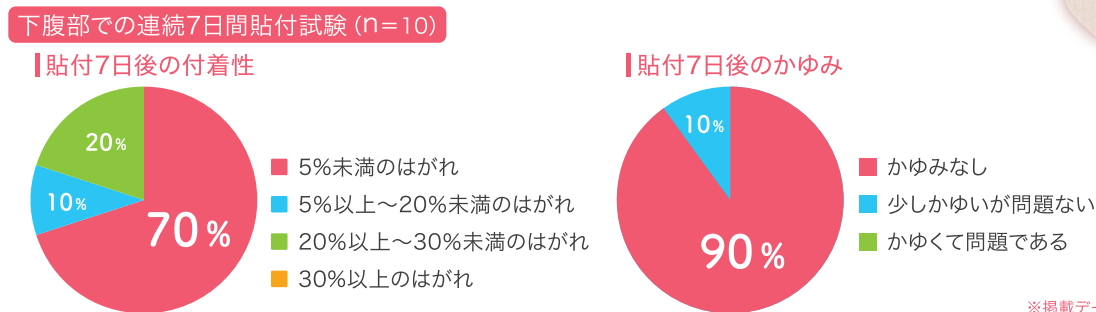

アトファイン™ 規格

サイズ	品番	1箱内容	包装入目	希望小売価格 (消費税別)	JANコード	JANコード 中箱・細 G-TINコード	個箱サイズ 幅×奥行×高さ 中箱サイズ 幅×奥行×高さ 細 サイズ 幅×奥行×高さ	質量
SSサイズ 25mm×25mm	ATFSS	24枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 095574	4987167095574	95×30×120mm	28g
Sサイズ 30mm×49mm	ATFS	12枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 081928	14987167081928	204×331×260mm	1.4kg
Mサイズ 50mm×114mm	ATFM	6枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 081935	14987167081935	204×331×260mm	1.4kg
Lサイズ 50mm×164mm	ATFL	6枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 081942	14987167081942	204×331×260mm	1.6kg
LLサイズ 60mm×214mm	ATFLL	4枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 091125	14987167091125	224×331×260mm	1.7kg
カーブ Mサイズ 30mm×75mm	ATFCM	6枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 105334	14987167105334	95×30×140mm	27g
カーブ Lサイズ 40mm×145mm	ATFCL	6枚入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	1,800円	4 987167 105327	14987167105327	95×30×140mm	35g
ロール 幅50mm×3m巻	ATFR	1巻入	個装 — 中箱 — 細箱 40コ	4,200円	4 987167 105341	14987167105341	50×50×(75+15)mm	48.6g

アトファイン™ 傷あとケアテープ 規格

サイズ	品番	1箱内容	包装入目	希望小売価格 (消費税別)	JANコード	JANコード 中箱・細 G-TINコード	個箱サイズ 幅×奥行×高さ 中箱サイズ 幅×奥行×高さ 細 サイズ 幅×奥行×高さ	質量
Mサイズ 50mm×114mm	ATK3M	3枚入	個装 — 中箱 10コ 細箱 100コ	950円	4 987167 092641	4987167092641	95×30×132mm	20g
Lサイズ 50mm×164mm	ATK3L	3枚入	個装 — 中箱 10コ 細箱 100コ	980円	4 987167 092658	14987167092658	95×30×132mm	22g

使用上の注意

- 「傷あと」とは傷口が完全に閉じている状態のことを指します。開いている傷口や抜糸前の縫合創に使用しないでください。
- 皮ふを清潔にし、乾いた状態で貼ってください。テープを貼る部分の毛は、短く切っておいてください。その際は、「傷あと」を傷つけないようご注意ください。
- 皮ふかぶれやはがれの原因となりますので、テープは引っ張らずにお貼りください。
- 本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- はがす時は、皮ふや「傷あと」を傷めないように、テープの端から「傷あと」に向かってゆっくりとはがしてください。
- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい、小児の手の届かない所に保管してください。

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社
〒102-8811
東京都千代田区麹町5-1
https://www.nichiban.co.jp/
TM : trademark

傷あとケアについて
もっと知りたい方は

ニチバン 目立たない傷あとを目指して

検索



SEN2681FGP

ニチバン

日本製

手術後の傷あとケアテープ

Ato fine™

アトファイン

目立たない傷あとを目指して
誰でも簡単に傷あとをケア

手術後の傷あと

傷が治ったあとの状態は、大きく分けて3種類あります。

● **成熟瘢痕**

せいじゅくはんこん

最初は赤かった傷あとが、時間が経つにつれ周囲と同じ色から白色に落ち着いた状態。

● **肥厚性瘢痕**

ひこうせいはんこん


もとの傷に沿って盛り上がり、赤みやかゆみが生じる状態。

● **ケロイド**

もとの傷の範囲を超えて赤みと盛り上がり、広がりが広がる状態。肥厚性瘢痕よりも痛みやかゆみが強くなります。

傷あとケアの必要性

手術の傷の治癒過程

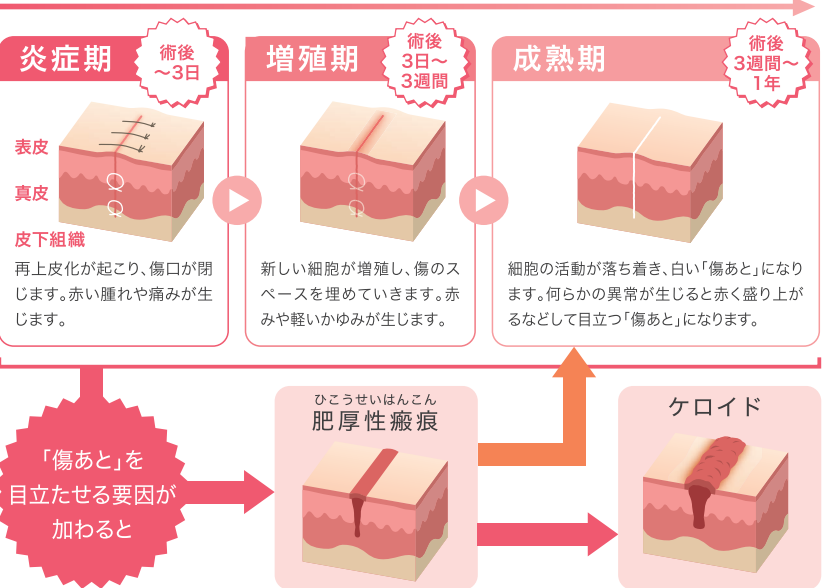

「傷あと」を目立たせる要因とは？

■ 体質 ■ 摩擦刺激

■ 紫外線 ■ テープのはく離刺激

■ 「傷あと」への伸展刺激



↓ ↓ ↓

伸展刺激・摩擦刺激・紫外線の3つから「傷あと」を守る「傷あと」専用のテープを使ってセルフケア

「傷あと」専用のテープを使って、傷口が閉じた直後から最低でも3か月間、「傷あと」の赤みがなくなるまでケアを続けましょう。


傷あとケアの実態について

ネット調査対象：50歳以下の帝王切開経験女性 200名

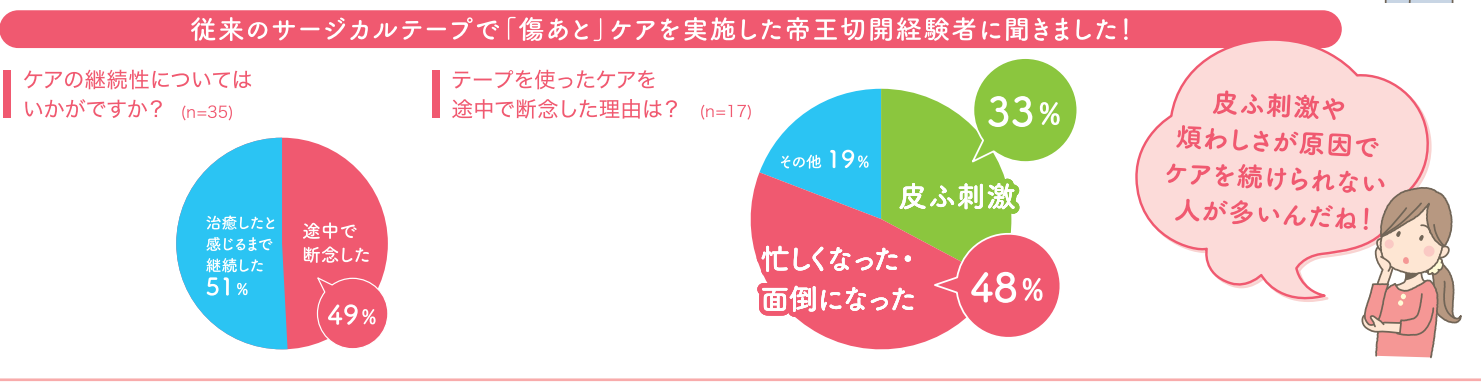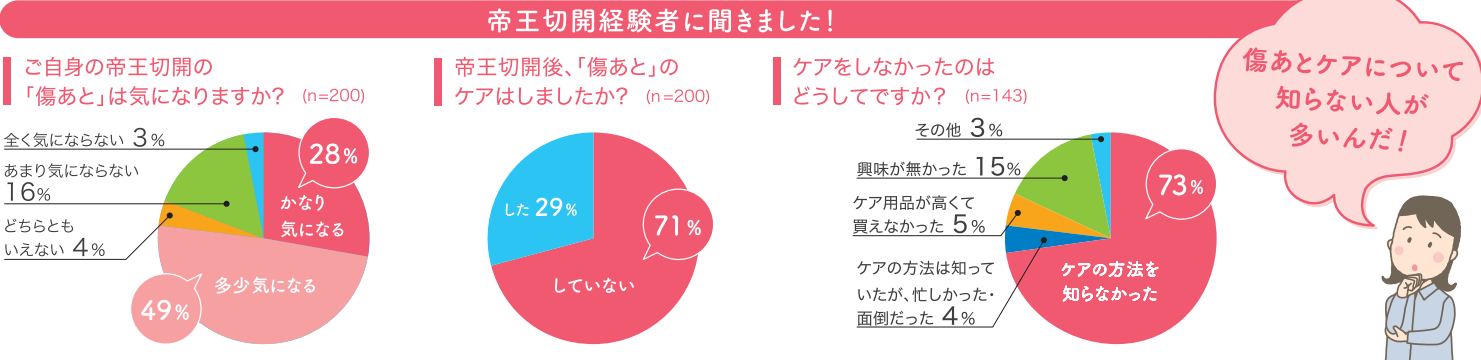

誰でも簡単に長くケアを続けられるテープが欲しい
そんな声から生まれたのが **Ato fine** です。

様々な手術後の傷あとに ※抜糸後からご使用いただけます。

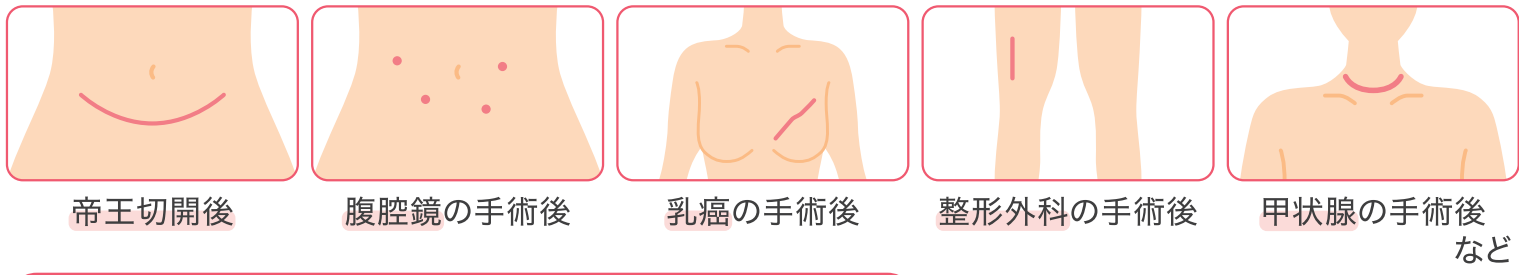

傷あとのサイズに合わせてケアしたい方に

S サイズ
1～4cmの「傷あと」に

M サイズ
4～10cmの「傷あと」に

L サイズ
10～15cmの「傷あと」に

LL サイズ
15～20cmの「傷あと」に

SS サイズ
～1.5cmの「傷あと」に

実寸サイズ

中央のはく離紙をはがします。

両側のはく離紙を持ち、テープ中央に「傷あと」を合わせて、テープを伸ばさずに貼ります。

両側のはく離紙をゆっくりはがしながら、テープを伸ばさずに貼ります。

首元・曲線の傷あとをケアしたい方に

カーブ

実寸サイズ

使用方法

1

4か所のミシン目を手でカットして、中央のはく離紙をはがしてください。

2

テープ中央に傷あとを合わせて、テープを伸ばさずに貼ります。

3

両側のはく離紙をゆっくりはがしながら、テープを伸ばさずに貼ります。指で押さえて肌に密着させてください。

ご自身でサイズを調整したい方に

ロール 幅5cm×3m巻

使用方法

1

傷あとよりも、両端がそれぞれ1cm以上、長くなるようにテープを切ります。

2

テープの両端が丸くなるように切ってください。※カドがあるとテープがはがれやすくなります。

3

片側のはく離紙を少しはがしテープ中央に傷あとを合わせ、端からテープを伸ばさずに貼ります。

4

はく離紙をゆっくりはがしながら、テープを伸ばさずに貼ります。

交換の目安

5～7日に1回を目安に交換してください。貼ったまま入浴できます。ただし、はがれてきたら貼りかえてください。

お腹に貼る時のポイント

横向きに貼る時

縦向きに貼る時

座った状態で貼ると皮ふかぶれやテープはがれの原因となりますので、立った状態で貼ってください。

はがす時

テープの端から「傷あと」に向かってゆっくりとはがしてください。