カテリープラス™カーブのはがし方



テープの端を水平方向に引っ張りながら
ゆっくりとはがすか、テープを折り返して
ゆっくりとはがしてください

\ Point /
- テープをゆっくりとはがすことで皮ふを傷めにくいです
- はがれにくい場合は、はく離剤を使用してください



使用上の注意

- 滅菌していない製品のため、傷のある部位や、穿刺部には貼らないでください。
- 感染している部位、出血がある部位、皮ふ障害がある部位には貼らないでください。
- 皮ふや面板に水分が残っているとテープがはがれる原因となるため、テープを貼る前に皮ふや面板をよく拭き、清潔で乾いた状態にしてください。
- 使用中に貼付部位に感染または皮ふ障害と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、医師または看護師に相談してください。
- シャワー、入浴の際は、必ず事前に水が入らないよう全面に密着していることを確認してください。
- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で遮光保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- ストーマ装具の交換時に、カテリープラス™カーブも交換してください。テープがはがれてきた場合は、新しいテープに貼り替えてください。

皮ふ障害とは

発疹・発赤
水ぶくれ
皮ふはがれ
かゆみ等

規格

品番	サイズ	1個	JANコード
CPSC0412	39mm×127mm	30枚 (3枚×10シート)	4987167096656

カテリープラス™カーブ
貼り方の動画はこちらより

TM:Trademark

ニチバン株式会社
〒102-8811　東京都千代田区麹町 5-1
https://www.nichiban.co.jp/

お問合せ先 ニチバン株式会社 お客様相談室
TEL 0120-377-218 受付時間 9:00～12:00,13:00～16:00
(土・日・祝日を除く)

日本製
MADE IN JAPAN

SEN2662BGP

NICHIBAN

ストーマ面板の外周保護、皮ふの被覆・保護に


カテリープラス™カーブ



使い方ガイドブック

あんしん・かいてきな毎日のために
カテリープラス™のやさしさを


カテリープラス™カーブは、
ストーマ面板の外周保護、皮ふの被覆・保護に特化した
防水性のフィルムドレッシングです

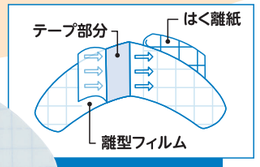

カテリープラス™カーブの特長


しっかり貼れてあんしん

簡単に切り離せてそのまま貼れるので使いやすいです
様々な形状の面板にしっかりフィットします

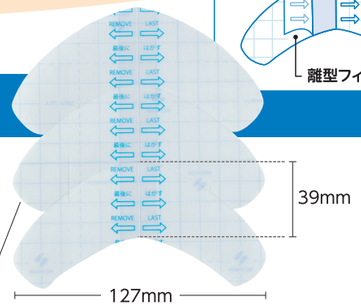

かいてきな着けごこち


薄く、しなやかな素材のため違和感が少なく、
かいてきな着けごこちです
高透湿でムレにくいウレタンジェル粘着剤を
採用しています

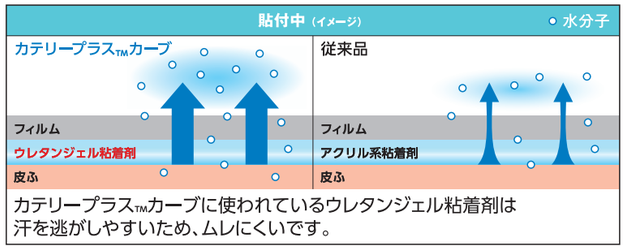

カテリープラス™カーブに使われているウレタンジェル粘着剤は
汗を逃がしやすいため、ムレにくいです。


肌にやさしく、ぴったりフィット

はがすときの皮ふへのダメージを抑えました
伸縮性のある防水フィルムが体の動きに追従します

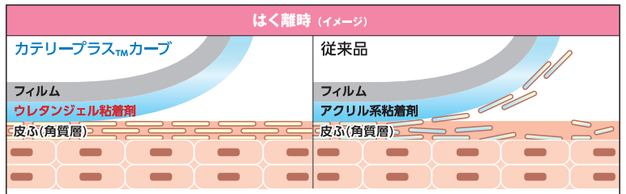


はがす時の皮ふのダメージを抑えた、肌に優しいテープです。

カテリープラス™カーブ 使用・金額のめやす

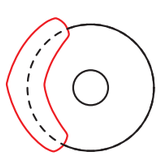


1枚使用
面板の一部分
のみに貼る場合

1枚使用した場合の費用 60円

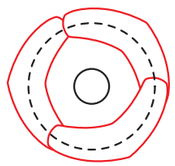

3枚使用
面板を全て
覆うように貼る場合

3枚使用した場合の費用 180円

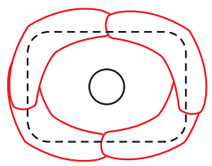


4枚使用
四角形の
面板を貼る場合

4枚使用した場合の費用 240円


＊価格は全て税抜価格です

＊ストーマ装具の交換時に、カテリープラス™カーブも交換してください。テープがはがれてきた場合は、新しいテープに貼り替えてください。

カテリープラス™カーブの貼り方

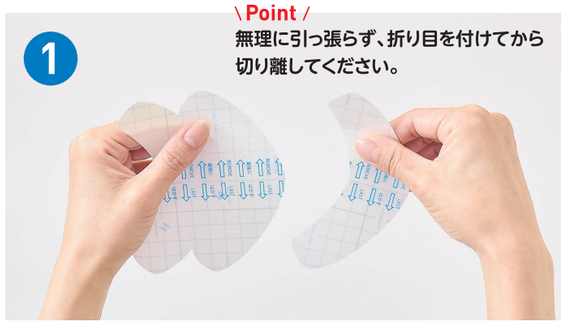

1枚ずつ切り離します

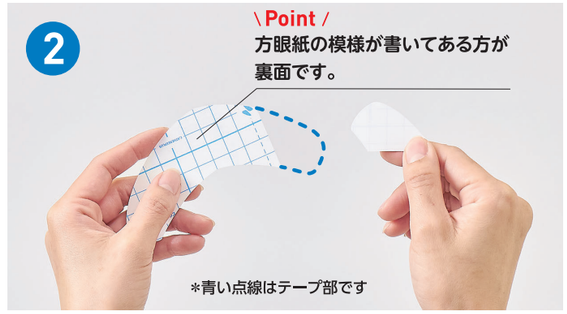


裏面の小さい方のはく離紙のみをはがします




フランジのカーブ部分に合わせてテープを貼ります



残りのはく離紙をゆっくりはがし、
離型フィルムの上からしっかりと押さえます

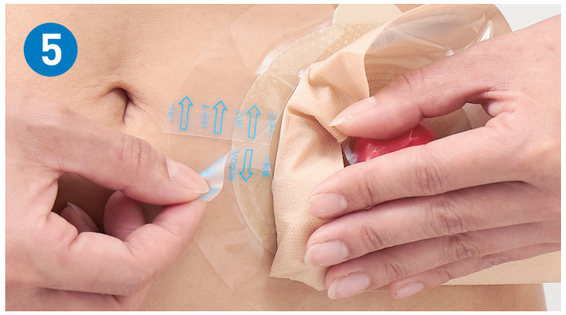


離型フィルムをゆっくりはがします

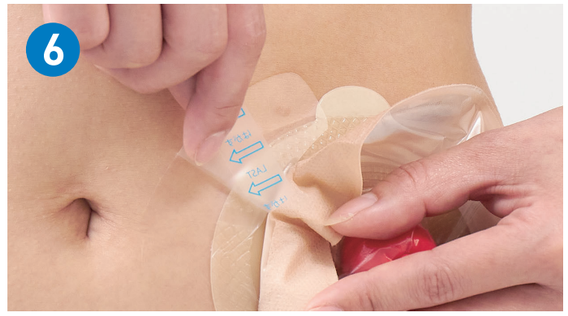

残りの離型フィルムもゆっくりはがします



貼り終わったら、しっかりと皮ふになじませます

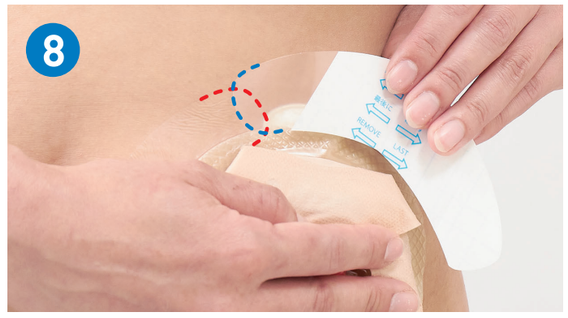

2枚以上使用する場合は、テープの端を重ねるように
貼るとはがれにくくなります

貼り方の動画は裏面のQRコードよりご確認ください。