NICHIBAN

パッド付防水性ドレッシング

再使用禁止 EOG滅菌済

ニチバン

# カテリープラス™パッド

# CATHEREEPLUS™ PAD

高透湿










## 高透湿性フィルムドレッシングの
## カテリープラス™に
## 高吸収性パッドをつけてやさしく保護。

高透湿 高固定 低刺激 ＋ 高吸収 ＝ カテリープラス™パッド

高透湿性フィルムドレッシング　　高吸収性パッド

**形状**

創傷面に固着しにくい
高吸収性パッド

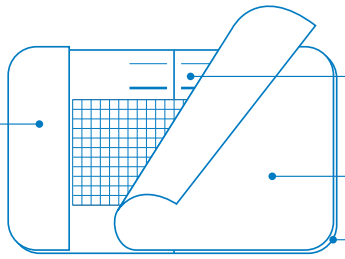

テープ
基　材：ウレタンフィルム
粘着剤：ウレタンジェル粘着剤

はく離紙

離型フィルム

パッド付防水性ドレッシング

# カテリープラス™パッド




# 3つの思いやりに パッドをプラス

## 新開発ウレタンジェル粘着剤採用

新開発のウレタンジェル粘着剤がこれまでにない「透湿性」を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで実現します。

## パッド・粘着面に触れず衛生的に貼付


はく離紙の一部を持って、パッドや粘着部に触れることなく皮膚に貼付でき、衛生的です。また、離型フィルムも簡単にはがせます。

## 高吸収性のパッド


パッドはガーゼ10枚分以上のすぐれた吸収力（同面積比）をもちます。

## 創傷面に固着しにくいパッド


表面を多孔ポリエチレンフィルムで覆った非固着性パッドで、患部をやさしく保護します。

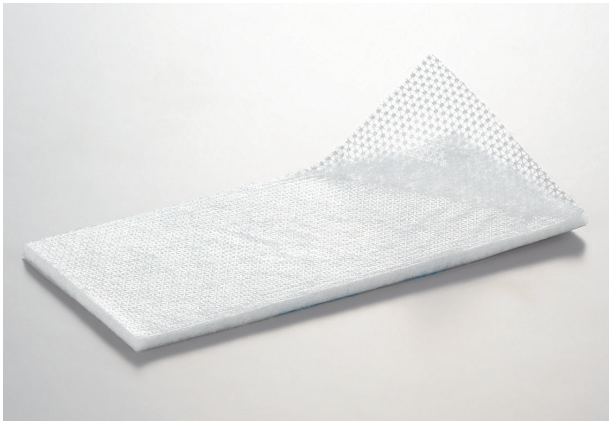


## 使用方法

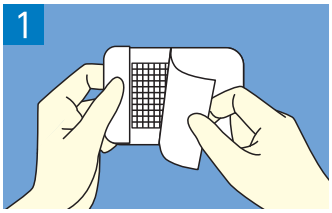



大きい方のはく離紙をゆっくりはがす。

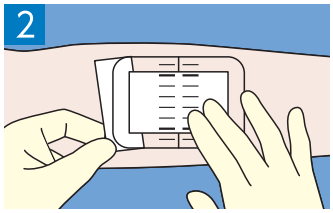


創部にパッドを当てて、残りのはく離紙をはがし、周りのテープで固定する。

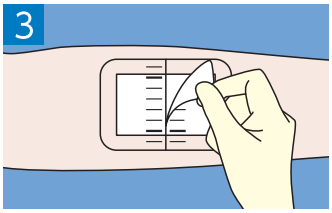


粘着面をしっかりと貼った後、離型フィルムをゆっくりはがす。

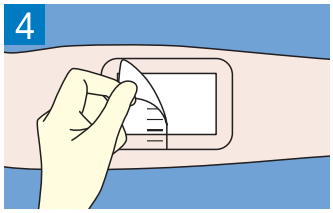


残った離型フィルムをゆっくりはがし、ならすように皮膚に密着させる。

※カテーテル固定に使用する場合は、必要に応じてサージカルテープ等でカテーテルをしっかり固定してください。

A4判の添付文書をご要望の際は、お客様相談室にご連絡ください。

TM:trademark 日本製

## 使用目的、効能又は効果

1. 救急絆創膏用途
   傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
2. カテーテル固定用途
   注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

## 規格

| 品番 | サイズ | | 1箱 |
|---|---|---|---|
| | 粘着部 | パッド部 | |
| CPSP0508 | 50mm×80mm | 25mm×50mm | 50枚 |
| CPSP0610 | 60mm×100mm | 30mm×65mm | 50枚 |
| CPSP0812 | 80mm×120mm | 40mm×80mm | 25枚 |
| CPSP0915 | 90mm×150mm | 50mm×100mm | 20枚 |
| CPSP0921 | 90mm×210mm | 50mm×160mm | 15枚 |

販売名：カテリープラスパッド
一般医療機器：救急絆創膏（カテーテル被覆・保護材）
医療機器届出番号：13B2X00218211201
製造販売元・発売元：［ニチバン株式会社］〒102-8811　東京都千代田区麹町5-1
お客様相談室：［TEL］0120-377-218
受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）
製造元：ニチバンメディカル株式会社


ニチバン株式会社
〒102-8811　東京都千代田区麹町5-1
ホームページ https：//www.nichiban.co.jp/