

カテリープラス™ 3つの思いやり

さらさら
高透湿

ウレタンジェル粘着剤は一般的なアクリル粘着剤の約7倍*1の
高い透湿性があり、長時間の貼付でも快適です。

ウレタンジェル
粘着剤

ウレタンジェル粘着剤をフィルム全面にムラなくコーティングし、皮膚の凹凸にぴったりと密着します。

ぴったり
高固定

やさしい
低刺激

しなやかに変形するウレタンジェル粘着剤が、はがす時の角質のはく離・損傷を軽減します。

高透湿 高固定 低刺激 の3つの思いやりをプラス

優れた柔軟性・伸縮性

伸びが良くしなやかな質感のため、動きの多い箇所への貼付でも違和感の少ない自然な貼り心地です。

高い視認性

貼付部分の状態観察が容易なので、発赤や腫脹・液漏れなどの早期発見が可能です。

はく離時の痛みが少ない

はく離時の痛みを抑えた肌にやさしい貼り心地で、患者さんの負担を軽減します。*2








優れた滑り性

滑りの良いフィルム表面により、衣服やリネン等が引っかかりにくくテープがはがれにくいです。

防水性・バクテリアバリア性

防水性に優れているため、貼付したままシャワー浴が可能です。また、外部からの細菌の侵入も防ぎます。*3

*1~3当社調べ(社内データ:保証値ではありません)

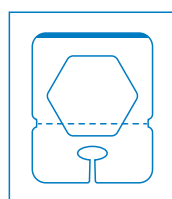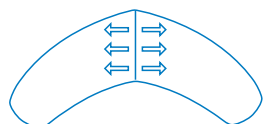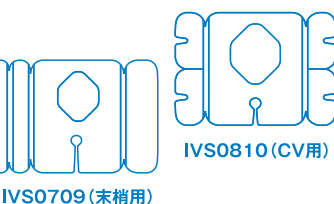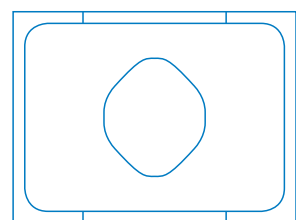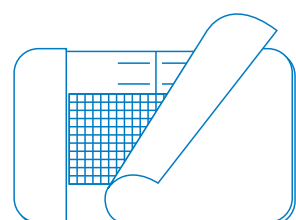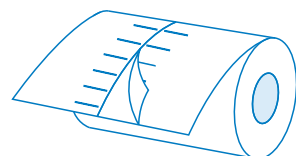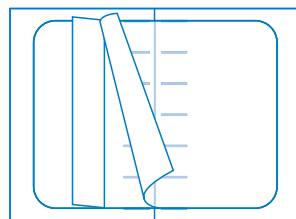

TMtrademark

カテリープラス™

CATHEREEPLUS™

EOG滅菌済

品番	サイズ	1箱	標準価格
CPS 0203	25mm×30mm	30枚	3,600円
CPS 0405	40mm×50mm	50枚	6,000円
CPS 0608	60mm×80mm	35枚	6,000円
CPS 0811	85mm×110mm	30枚	6,750円
CPS 1114	110mm×140mm	25枚	6,750円
CPS 1820	180mm×200mm	12枚	6,000円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材(救急絆創膏)
医療機器届出番号：1382X00218130110

カテリープラス™ ロール

CATHEREEPLUS™ ROLL

未滅菌品

品番	サイズ	1箱	標準価格
CPSR 0510	50mm×10m	1巻	2,800円
CPSR 1010	100mm×10m	1巻	5,000円
CPSR 1510	150mm×10m	1巻	6,800円

カテリープラス™ パッド

CATHEREEPLUS™ PAD

EOG滅菌済

品番	サイズ		1箱	標準価格
	粘着部	パッド部		
CPSP0508	50mm×80mm	25mm×50mm	50枚	7,800円
CPSP0610	60mm×100mm	30mm×65mm	50枚	11,300円
CPSP0812	80mm×120mm	40mm×80mm	25枚	8,300円
CPSP0915	90mm×150mm	50mm×100mm	20枚	8,500円
CPSP0921	90mm×210mm	50mm×160mm	15枚	7,900円

一般医療機器：救急絆創膏(カテーテル被覆・保護材)
医療機器届出番号：1382X00218211201

カテリープラス™ I.V.

CATHEREEPLUS™ I.V.

EOG滅菌済

品番	サイズ			1箱	標準価格
	粘着部	観察部	カテーテル固定用テープ		
IV0608	60mm×80mm	34mm×39mm	15mm×80mm×3枚	35枚	5,800円
IV0811	80mm×110mm	44mm×51mm		30枚	6,500円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：1382X00218221301

カテリープラス™ I.V. スリット

CATHEREEPLUS™ I.V. SLIT

EOG滅菌済

品番	サイズ			1箱	標準価格
	粘着部	観察部	カテーテル固定用テープ		
IVS0709 (末梢用)	70mm×90mm	34mm×39mm	12.5mm×90mm×2枚 25mm×90mm×1枚	50枚	8,250円
IVS0810 (CV用)	80mm×95mm	44mm×51mm	23mm×47.5mm×4枚	30枚	7,500円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：1382X00218221302

カテリープラス™ カーブ

CATHEREEPLUS™ CURVE

品番	サイズ	1箱	標準価格
CPSC0412	39mm×127mm	30枚(3枚×10シート)	1,500円

カテリープラス™ エコー

CATHEREEPLUS™ ECHO

EOG滅菌済

品番	サイズ			1箱	標準価格
	粘着部	観察部	カテーテル固定用テープ		
CPSE0810	80mm×100mm	60mm×55mm	15mm×80mm×3枚	50枚	12,000円

一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：1382X00218222201

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

ホームページ: <https://www.nichiban.co.jp/>

SEN2331A0SC

NICHIBAN

高透湿性フィルムドレッシング

カテリープラス™ CATHEREEPLUS™ SERIES シリーズ

カテリープラス™

カテリープラス™ ロール

カテリープラス™ パッド

カテリープラス™ I.V.

カテリープラス™ I.V. スリット

カテリープラス™ カーブ

カテリープラス™ エコー



業界初 **ウレタンジェル粘着剤**を採用した

“カテリープラスTM”シリーズ



高透湿


ウレタンジェル粘着剤は、汗などの水分を逃がす透湿性が非常に高い粘着剤です。透湿性が高いと皮膚の浸軟を防ぎ、長期間、安定した固定力を維持し続けます。また、はく離時の皮膚へのダメージを軽減します。

カテリープラスTM (ウレタンジェル粘着剤)


貼付中
(イメージ)

従来品 (アクリル粘着剤)

●:水分子

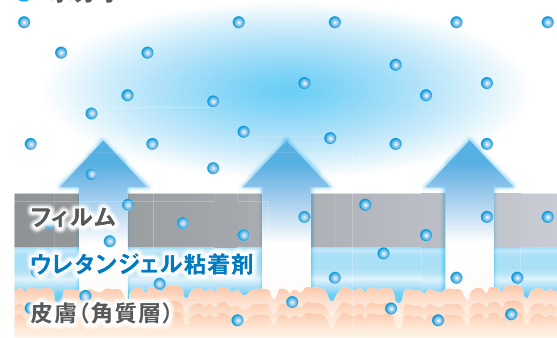

高透湿のウレタンジェル粘着剤により、貼付中に水分(汗など)の貯留がおきにくく、長時間の固定が可能です。

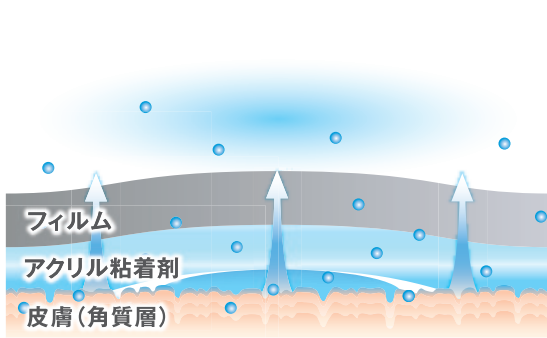


透湿性の低いアクリル粘着剤では、汗の貯留によりテープが浮いてしまい、はがれやすくなります。


カテリープラスTM (ウレタンジェル粘着剤)

はく離時
(イメージ)

従来品 (アクリル粘着剤)

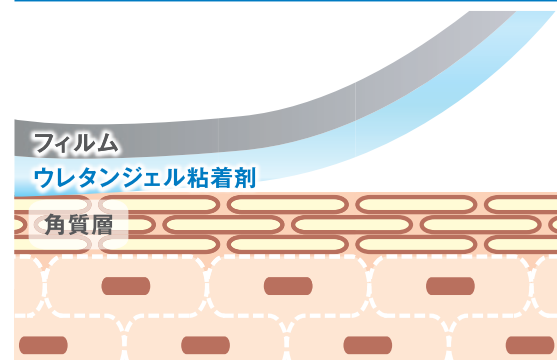

透湿性が高いため、皮膚の浸軟を防ぎ、はがす際の皮膚ダメージを軽減します。

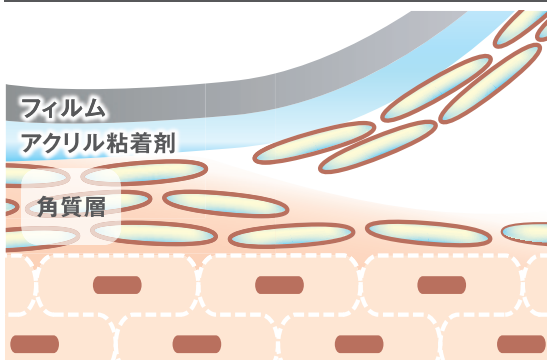

汗の貯留により角質層の結合が緩みやすくなり、はがす際の角質はく離や表皮はく離が起こりやすくなります。

カテリープラスTMシリーズのラインナップ

高透湿フィルムドレッシング

カテリープラスTM

新生児のカテーテル固定から創傷保護まで幅広い用途に対応したドレッシング材



■ センターピール仕様で手袋をしたままでも取り扱いが簡単です。



新生児のPICC固定

CV固定

パッド付防水性ドレッシング

カテリープラスTM パッド

創傷面に固着しにくい高吸収性パッドを備えた創面保護用のドレッシング材



■ 創傷面に固着しにくいパッドで、患部をやさしく保護します。
■ ガーゼ10枚分以上の優れた吸収力をもつ高吸収性パッドで創傷面を保護します。



傷口の被覆及び保護

術後創の被覆保護

高透湿フィルムドレッシング

カテリープラスTM ロール

ガーゼや創傷被覆材の固定、シャワー浴時の防水等に
必要な長さにカットして使えるロールタイプ



■ キャリアフィルムは中央から簡単にはがすことができます。

皮膚の保護

高透湿性フィルムドレッシング

カテリープラスTM カーブ

ストーマ面板の外周保護・皮膚被覆保護に



■ 切らずにそのまま貼れるので使いやすいです。
■ さまざまな形状の面板にしっかりフィットします。

ストーマ面板の外周保護

カテーテル穿刺部固定用ドレッシング

カテリープラスTM I.V.

作業性に優れたキャリアレス仕様のカテーテル穿刺部固定用ドレッシング材



■ ひし形ウィンドウによりフィルム部の中央がわかりやすく、正確に貼ることができます。
■ キャリアフィルムがなく、柔軟性の高いテープのため、隙間なくしっかりと密着させることができます。
■ 付属の固定テープは粘着面に触れずに使用でき衛生的。




末梢部のカテーテル固定

硬膜外カテーテル固定

カテーテル穿刺部固定用ドレッシング

カテリープラスTM I.V. スリット

用途に合わせた固定テープ体型の穿刺部固定用ドレッシング材 スリットタイプ

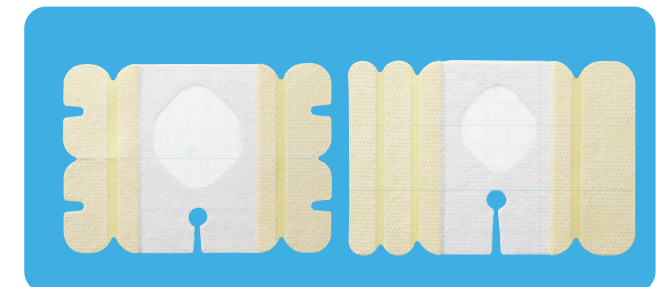

■ CV固定と末梢固定に合わせた専用サイズ。
■ スリット入りでカテーテルをしっかりと固定します。
■ チューブ固定用テープが一体化されていて使いやすいです。



CV固定


末梢固定

エコーガイド下穿刺・固定用ドレッシング


カテリープラスTM エコー

NEW!

エコーを使用した末梢静脈穿刺の固定にキャリアフィルムの上からでもしっかりとエコーが透過します

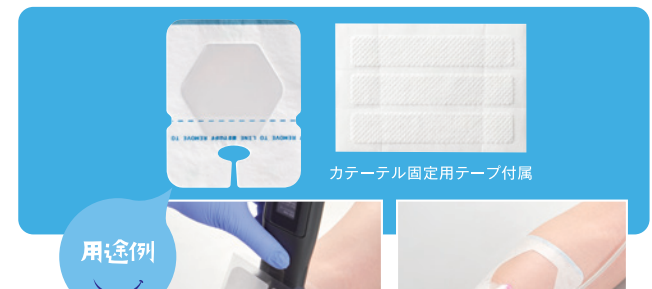

用途例

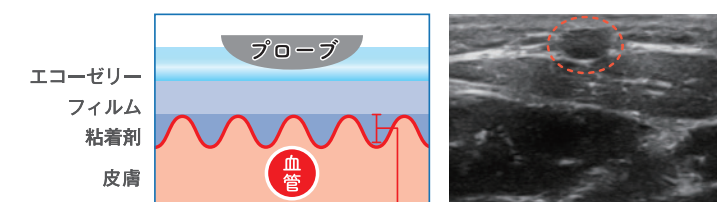

皮膚へしっかりとなじみ
良好なエコー透過性が
得られます

赤く囲っている部分がカテリープラスTMエコー上から観察した静脈の画像です。

■ ウレタンジェル粘着剤がしっかりと皮膚になじむのでキャリアフィルムの上からでも高いエコー透過性があります。
■ エコーを使用した血管確認、穿刺、固定までの作業を一連の流れで行うことができます。
■ 穿刺部に触れることなく衛生的に使用できます。